

**Государственное санитарно-эпидемиологическое  
нормирование Российской Федерации**

---

**2.6.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Изомерспецифическое определение  
полихлорированных бифенилов (ПХБ) в  
пищевых продуктах**

**Методические указания  
МУК 4.1.1023—01**

**Издание официальное**

**Минздрав России  
Москва•2001**

## **2.6.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

### **Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах**

**Методические указания  
МУК 4.1.1023—01**

**ББК 51.23**

**ИЗ8**

**ИЗ8 Изомерспецифическое** определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах: Методические указания.—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001.—20 с.

**ISBN 5—7508—0262—0**

1. Разработаны Институтом питания РАМН (Эллер К. И., к. х. н., рук. лаборатории; Бессонов В. В., к. х. н., ст. н. с.; Волкович С. В., н. с.; Левин Л. Г., к. м. н., ст. н. с.; Хромченкова Е. П., м. н. с.).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при МЗ РФ (протокол № 4 от 19 октября 2000 г.).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации – Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации 15 марта 2001 г.

4. Введены впервые.

**ББК 51.23**

Редакторы Барабанова Т. Л., Максакова Е. И.  
Технический редактор Юшкова Т. Г.

Подписано в печать 29.05.01

Формат 60x88/16

Печ. л. 1,25  
Заказ 21

Тираж 3000 экз.

ЛР № 021232 от 23.06.97

Министерство здравоохранения Российской Федерации  
101431, Москва, Рахмановский пер., д. 3

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
Издательским отделом

Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава России  
125167, Москва, проезд Аэропорта, 11.  
Отделение реализации, тел. 198-61-01

© Минздрав России, 2001

© Федеральный центр госсанэпиднадзора  
Минздрава России, 2001

## Содержание

1. Назначение и область применения .....	4
2. Общие положения.....	4
3. Основные характеристики метода .....	8
4. Принцип метода .....	8
5. Аппаратура и оборудование .....	9
6. Реактивы и стандартные растворы.....	10
7. Подготовка реактивов для проведения анализов .....	10
8. Гидролиз образца и экстракция ПХБ .....	11
9. Очистка экстракта с помощью КХ на флоризиле.....	11
10. ГЖХ фракции ПХБ и расчет концентрации индивидуальных ПХБ в образцах .....	12
11. Расчет погрешности измерений .....	16
12. Требования к квалификации исполнителей и техники безопасности .....	16
Приложения .....	17

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный государственный санитарный врач  
Российской Федерации – Первый замести-  
тель министра здравоохранения Российской  
Федерации

Г. Г. Онищенко

15 марта 2001 г.

Дата введения: 15 июня 2001 г.

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Изомерспецифическое определение  
полихлорированных бифенилов (ПХБ)  
в пищевых продуктах**

**Методические указания  
МУК 4.1.1023—01**

---

**1. Назначение и область применения**

Настоящие методические указания устанавливают метод изомерспецифического определения массовых концентраций токсичных полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах с помощью капиллярной газожидкостной хроматографии (КГЖХ) с детектором электронного захвата (ДЭЗ) и предназначены для проведения лабораторных исследований безопасности пищевой продукции и исследования биологического материала (молока, жировой ткани) при оценке нагрузки ПХБ на организм учреждениями госсанэпидслужбы Минздрава РФ, а также для организаций и учреждений, осуществляющих контроль качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с СанПиН 2.3.2.560—96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» и аккредитованных в установленном порядке.

**2. Общие положения**

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – группа стабильных хлорированных ароматических углеводородов, широко использовавшихся в промышленности. Несмотря на повсеместный запрет их использования, смеси наиболее устойчивых ПХБ, отличающихся по степени хлорирования (от 21 до 68 % хлора) и составу индивидуаль-

ных ПХБ (конгенов), до настоящего времени обнаруживаются в значимых концентрациях в отходах производств, окружающей среде и биологических объектах. Из 209 возможных конгенов ПХБ около 50 являются наиболее стабильными и могут накапливаться в различных звеньях пищевой цепи. Химическая структура и принятая нумерация наиболее распространенных и актуальных с гигиенической точки зрения конгенов ПХБ приведены в табл. 1.

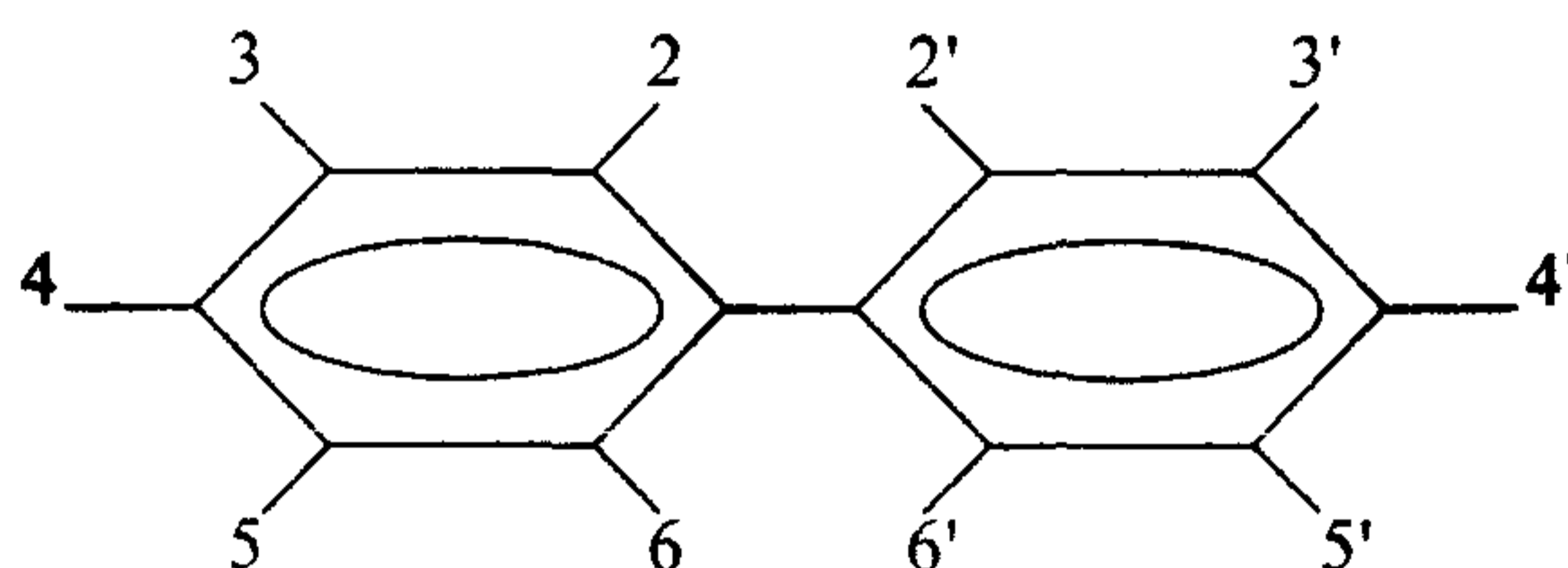


Таблица 1

## Химическая структура и принятая нумерация конгенов ПХБ

№ индивидуального конгенера ПХБ	Наименование	Положение атомов хлора
1	2	3
15	Дихлорфенил	4,4'
18	Трихлорбифенил	2,2',5
22	Трихлорбифенил	2,3,4'
28	Трихлорбифенил	2,4,4'
31	Трихлорбифенил	2,4',5
33	Трихлорбифенил	2',3,4
40	Тетрахлорбифенил	2,2',3,3'
42	Тетрахлорбифенил	2,2',3,4'
44	Тетрахлорбифенил	2,2',3,5'
49	Тетрахлорбифенил	2,2',4,5'
52	Тетрахлорбифенил	2,2',5,5'
54	Тетрахлорбифенил	2,2',6,6'
66	Тетрахлорбифенил	2,3',4,4'

1	2	3
71	Тетрахлорбифенил	2,3',4',6
74	Тетрахлорбифенил	2,4,4,5
76	Тетрахлорбифенил	2',3,4,5
77	Тетрахлорбифенил	3,3',4,4'
82	Пентахлорбифенил	2,2',3,3',4
85	Пентахлорбифенил	2,2',3,4,4'
86	Пентахлорбифенил	2,2',3,4,5
87	Пентахлорбифенил	2,2',3,4,5'
95	Пентахлорбифенил	2,2',3,5',6
97	Пентахлорбифенил	2,2',3',4,5
99	Пентахлорбифенил	2,2',4,4',5
101	Пентахлорбифенил	2,2',4,5,5'
105	Пентахлорбифенил	2,3,3',4,4'
110	Пентахлорбифенил	2,3,3',4',6
114	Пентахлорбифенил	2,3,4,4',5
118	Пентахлорбифенил	2,3',4,4',5
119	Пентахлорбифенил	2,3',4,4',6
121	Пентахлорбифенил	2,3',4,5',6
128	Гексахлорбифенил	2,2',3,3',4,4'
129	Гексахлорбифенил	2,2',3,3',4,5
134	Гексахлорбифенил	2,2',3,3',5,6
136	Гексахлорбифенил	2,2',3,3',6,6'
137	Гексахлорбифенил	2,2',3,4,4',5
138	Гексахлорбифенил	2,2',3,4,4',5'
141	Гексахлорбифенил	2,2',3,4,5,5'
146	Гексахлорбифенил	2,2',3,4',5,5'
151	Гексахлорбифенил	2,2',3,5,5',6
153	Гексахлорбифенил	2,2',4,4',5,5'
154	Гексахлорбифенил	2,2',4,4',5,6'
170	Гептахлорбифенил	2,2',3,3',4,4',5

Продолжение таблицы 1

1	2	3
171	Гептахлорбифенил	2,2',3,3',4,4',6
174	Гептахлорбифенил	2,2',3,3',4,5,6'
177	Гептахлорбифенил	2,2',3,3',4',5,6
180	Гептахлорбифенил	2,2',3,4,4',5,5'
182	Гептахлорбифенил	2,2',3,4,4',5,6'
183	Гептахлорбифенил	2,2',3,4,4',5',6
185	Гептахлорбифенил	2,2',3,4,5,5',6
187	Гептахлорбифенил	2,2',3,4',5,5',6
189	Гептахлорбифенил	2,3,3',4,4',5,5'
191	Гептахлорбифенил	2,3,3',4,4',5',6
194	Октахлорбифенилил	2,2',3,3',4,4',5,5'
195	Октахлорбифенилил	2,2',3,3',4,4',5,6
196	Октахлорбифенилил	2,2',3,3',4,4',5',6
199	Октахлорбифенилил	2,2',3,3',4,5,6,6'
206	Нонахлорбифенил	2,2',3,3',4,4',5,5',6
209	Декахлорбифенил	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'

В жировой ткани человека и женском молоке накапливаются в основном следующие конгенеры ПХБ: 138, 153, 156, 118, 180, 105, 99, 174, 170, 187, 101, 74, 66, 95, 146, 137, 183. В образцах рыбопродуктов чаще всего встречаются ПХБ: 138, 153, 99, 118, 110, 101, 87, 84, 52, 49, 44 и др.

Многочисленные опыты на животных показали, что длительное воздействие малых доз ПХБ может индуцировать опухоли, оказывает неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию. ПХБ проявляют эмбриотоксические и нейротоксические свойства. Согласно оценке Международного агентства исследований рака (МАИР) ПХБ следует рассматривать как потенциально канцерогенные вещества для человека.

ПХБ характеризуются высокой стабильностью в окружающей среде и способностью аккумулироваться в различных звеньях пищевой цепи. Основным источником поступления ПХБ в организм человека являются пищевые продукты. Показано, что ПХБ могут на-



капливаться в жировой ткани человека и экскретироваться с женским молоком.

Среднее поступление ПХБ с пищей в развитых индустриальных странах оценивается в 0,005—0,2 мкг/кг/сутки, поступление ПХБ в организм грудных детей с женским молоком – 2—12 мкг/кг/сутки.

В Российской Федерации установлен максимально допустимый уровень содержания суммы ПХБ в рыбе и рыбопродуктах на уровне 2,0 мг/кг и в биологически активных добавках к пище на основе рыбьего жира – на уровне 3,0 мг/кг (СанПиН 2.3.2.560—96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» раздел 6.3).

### **3. Основные характеристики метода**

Предел обнаружения метода составляет 0,001 мг/кг (по ПХБ-105) и 0,01—0,015 (для суммы изомеров ПХБ).

Диапазон определяемых массовых концентраций по ПХБ-105 составляет от 0,001 до 100 мг/кг .

При соблюдении всех регламентируемых методикой условий проведения измерений относительная характеристика погрешности (стандартное отклонение сходимости) результата анализа при концентрации суммы ПХБ в 1,0 мг/кг не превышает 0,023 (2,26 %). Среднее значение открываемости ПХБ при концентрациях от 0,2 до 20,0 мг/кг составляет от 85 до 88 %.

### **4. Принцип метода**

Метод включает следующие этапы:

- гидролиз пищевых продуктов или стабилизированного оксалатом калия молока 5 %-ным раствором гидроксида натрия в 96 %-ном водном этиловом спирте и экстракцию неомыляемой фракции гексаном;
- очистку фракции ПХБ с помощью колоночной хроматографии (КХ) на флоризиле (активированном силикате магния) или смеси флоризил-оксид алюминия;
- обнаружение, идентификацию и количественное определение индивидуальных ПХБ с помощью КГЖХ с ДЭЗ с использованием метода внутреннего стандарта.

## 5. Аппаратура и оборудование

1. Весы лабораторные общего назначения, с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, с пределом допустимой погрешности  $\pm 0,038$  г ГОСТ 24104—80
2. Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, с пределом допустимой погрешности  $+ 0,0005$  г ГОСТ 24104—80
3. Мельница электрическая ТУ 46—22—236—76
4. Аппарат для встряхивания проб АБУ-6С ТУ 64—1—2451—78
5. Центрифуга ОПн-8УХЛ 4.2 ТУ 5 375—4261—76
6. Ротационный испаритель типа ИР-1М ТУ 25—11—917—76
7. Насос вакуумный с электродвигателем или вакуум насос типа ВН-461М ГОСТ 14707—82  
ТУ 3—863—73
8. Баня силиконовая или глицериновая
9. Газовый хроматограф с детектором электронного захвата и инжектором с делением потока «split-splitless injector» для капиллярной колонки.
10. Капиллярная колонка с жидкой фазой SE-54, или DB-5, или Rtx-5, или HP-5, длина – 30—50 м, внутренний диаметр – 0,2—0,32 мм, толщина пленки жидкой фазы – 2—5 мкм
11. Баллон с азотом ос. ч. ГОСТ 9293—74
12. Микрошприцы МШ-10 или аналогичные
13. Колбы конические плоскодонные КНКШ-500—29/32, КНКШ-100—29/32, КНКШ-50—29/32 с НШ 29 ГОСТ 10394—72
14. Колбы круглодонные ККШ-1000—29/32, ККШ-500—29/32, ККШ-100—29/32 с НШ-29 ГОСТ 10394—72
15. Воронки делительные ВД-1—1000, ВД-1—500, ВД-1—250 ГОСТ 25336—82
16. Колбы грушевидные ГР 25—14/23, ГР 50—14/23, ГР 100—14/23 ГОСТ 25336—82
17. Цилиндры мерные типа 2—500, 2—100, 2—50, 2—25, 2—10 ГОСТ 1770—74
18. Пипетки мерные типа 4—1—1 на 10, 5, 2, 1 мм ГОСТ 20292—74
19. Колбы мерные 2—200—2, 2—100—2, 2—50—2, 2—25—2 ГОСТ 1770—74
20. Воронка Бюхнера ГОСТ 1770—74Е

МУК 4.1.1023—01

21. Колба Бунзена на 500 см	ГОСТ 1770—74Е
22. Холодильники стеклянные лабораторные типа ХПТ-2—400—29/32, ХШ-1—300—29/32	ГОСТ 25336—82
23. Колонки стеклянные для адсорбционной хроматографии длиной 250 мм с внутренним диаметром 8 мм	
24. Воронки стеклянные В-56—80, В-36—50, В-36—80	ГОСТ 25336—82

## 6. Реактивы и стандартные растворы

1. Фильтры обеззоленные марки ФОМ	
2. Вода дистиллированная	ГОСТ 6709
3. Гексан х. ч.	ТУ 6—094521—77
или ч.	ТУ 6—093375—78
4. Ацетонитрил для жидкостной хроматографии ОП-3 ос. ч.	ТУ 6—09—14216—78
или ч.	ТУ 6—09—3534—82
5. Спирт этиловый х. ч.	ГОСТ 18300—72
или спирт изопропиловый х. ч.	ТУ 6—09—402—81
6. Эфир медицинский	
7. Флоризил 100/200 mesh (силикат магния) для колоночной хроматографии «Supelco»	
8. Индивидуальные стандарты ПХБ и стандартные смеси ПХБ	
9. Конгенеры ПХБ-48, ПХБ-119; ПХБ-128; ПХБ-155; (фирма «Chemservice» США), смесь ПХБ арохлор 1254 * (см. приложение на стр. 17)	
10. Натрий серно-кислый (сульфат натрия) безводный, ч. д. а., промытый перегнанным хлороформом и прокаленный при $t = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 4166—76

## 7. Подготовка реактивов для проведения анализов

### 7.1. Очистка растворителей

Дистиллированная вода и органические растворители перегоняются перед анализом с использованием только стеклянной лабораторной посуды в условиях, исключающих контакт с пластиками.

## 7.2. Очистка и регенерация флоризила

Флоризил промывают под вакуумом на воронке Бюхнера смесью перегнанных гексана с ацетоном (1 : 1) или гексана с хлороформом (1 : 1), подсушивают на воздухе в вытяжном шкафу и в сушильном шкафу при  $t = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$ , выдерживают в муфельной печи при  $t = 600\text{ }^{\circ}\text{C}$  в течение 4 час. Использованный в ходе анализа флоризил отмывают дистиллированной водой от остатков сульфата натрия, фильтруют, подсушивают, для удаления остатков воды промывают ацетоном, смесью гексана с хлороформом (1 : 1), фильтруют под вакуумом, подсушивают на воздухе, затем в сушильном шкафу при  $110\text{ }^{\circ}\text{C}$  и активируют в муфельной печи при  $t = 600\text{ }^{\circ}\text{C}$  в течение 4 час.

## 8. Гидролиз образца и экстракция ПХБ

Усредненную и измельченную пробу (1 г) помещают в коническую колбу на 100 мл, заливают 50 мл 5 %-ного раствора гидроксида калия в 96 %-ном водном этаноле и кипятят с обратным холодильником 30 минут. После охлаждения выливают содержимое колбы в делительную воронку, в которую предварительно было налито 300 мл дистиллированной воды. Экстрагируют гексаном (2 × 60 мл). Объединенный гексановый экстракт промывают дистиллированной водой (3 × 40 мл), сушат сульфатом натрия, фильтруют через бумажный фильтр и упаривают на ротационном испарителе до объема около 1 мл.

## 9. Очистка экстракта с помощью КХ на флоризиле

Упаренный экстракт наносят на хроматографическую колонку с флоризилом (слой флоризила в колонке высотой 4—5 см, предварительно промыт 5 мл гексана), грушевидную колбу из-под экстракта ополаскивают 5 мл смеси гексан-эфир (95 : 5), которые также наносят на колонку. Колонку элюируют 45 мл смеси гексан-эфир (95 : 5), элюат собирают в грушевидную колбу на 100 мл и упаривают на ротационном испарителе до объема примерно 1 мл (раствор А). Остаток растворителя отдувают в слабом токе азота. Остаток растворяют в 1 мл гексанового раствора внутреннего стандарта ПХБ-119 с концентрацией 50 нг/мл (раствор В)\*.

\* В случае недостаточной очистки с помощью КХ на флоризиле раствор А дополнительно очищают путем жидкость-жидкостного распределения в системе гексан-ацетонитрил: раствор А упаривают в токе азота до суха, добавляют 15 мл гексана, насыщенного ацетонитрилом, и 15 мл ацетонитрила. Смесь переносят в делительную воронку и встряхивают. После разделения слоев верхний гексановый слой отбрасывают, к нижнему ацето-

нитрильному слою добавляют 100 мл дистиллированной воды. Фракцию ПХБ экстрагируют из водно-ацетонитрильного раствора гексаном (2 × 20 мл). Гексановый раствор сушат серно-кислым натрием, фильтруют через бумажный фильтр в грушевидную колбу на 100 мл и упаривают на ротационном испарителе до объема примерно 1 мл. Остаток растворителя отдувают в слабом токе азота. Остаток растворяют в 1 мл гексанового раствора внутреннего стандарта ПХБ-119 с концентрацией 50 нг/мл.

### 10. ГЖХ фракции ПХБ и расчет концентрации индивидуальных ПХБ в образцах

Раствор В анализируют с помощью ГЖХ с детектором электронного захвата.

Условия ГЖХ: кварцевая капиллярная колонка 30 или 50 м, внутренний диаметр 0,32 мм, жидкая фаза – полиметилфенилсилоксан (5 % фенила, 1 % дивинила) SE-54, DB-5, или Rtx-5, или HP-5:

температура колонки	220 °С;
температура испарителя	240 °С;
температура детектора	300 °С;
время выхода растворителя	2,5—3 мин (для колонки 50 м).

Перед исследованием образцов необходимо провести контроль растворителя (гексана), на наличие пиков посторонних веществ, накладывающихся при ГЖХ на пики анализируемых ПХБ.

Предварительно калибруют колонку, определяют приведенные относительные времена удерживания стандартов ПХБ (ПХБ-48, ПХБ-128, ПХБ-155, рис. 1) и основных пиков стандарта арохлора 1254 (рис. 2) относительно внутреннего стандарта ПХБ 119 на их соответствие табличным данным (см. табл. 2). Идентификация пиков при ГЖХ образца проводят по приведенным относительным временам удерживания (RRT) по таблице. Значения RRT для индивидуальных конгенов ПХБ должны воспроизводиться с точностью до 0,001—0,003 (1—3 единиц в третьем знаке после запятой).

Определение относительного приведенного времени удерживания (RRT) по внутреннему стандарту проводится по формуле:

$$RRT = \frac{T_r - T_o}{T_{st} - T_o}, \text{ где}$$

$T_r$  – время выхода пика конгенера;

$T_o$  – время выхода пика неудерживаемого компонента (растворителя);

$T_{st}$  – время выхода внутреннего стандарта (ОСН или инд. ПХБ-119).

Относительные приведенные времена удерживания (RRT) и калибровочные коэффициенты  $K_s$  наиболее распространенных индивидуальных ПХБ по ПХБ-119 и октахлорнафталину (ОСН) при ГЖХ на жидкой фазе SE-54, температура 220 °С приведены в табл. 2.

Таблица 2

**Относительные приведенные времена удерживания (RRT) и калибровочные коэффициенты наиболее распространенных индивидуальных ПХБ по ПХБ 119 и по октахлорнафталину при ГЖХ на жидкой фазе SE-54 , температура 220 °С**

№ инд. ПХБ	RRT по ПХБ 119	$K_s$ по ПХБ 119	RRT по октахлорнафталину
1	2	3	4
18	0,322	4,07	0,047
15	0,328	13,45	0,047
54	0,402	3,46	0,058
31	0,426	2,15	0,062
28	0,434	1,73	0,063
33	0,464	2,77	0,067
22	0,486	0,98	0,071
52	0,532	2,98	0,077
49	0,549	1,83	0,079
48	0,559	1,42	0,082
44	0,611	2,33	0,088
42	0,628	1,45	0,091
71, 41, 64	0,665	–	0,097
40	0,699	1,62	0,101
74	0,765	1,76	0,111
76, 70	0,781	1,94	0,114
66	0,802	1,84	0,117
95	0,809	0,80	0,117

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
121	0,809	1,51	0,117
155	0,873	0,93	0,127
101	0,930	1,77	0,135
99	0,959	1,95	0,139
119	1,000	1,00	0,146
97	1,070	1,89	0,155
86	1,075	1,44	0,156
87	1,101	1,07	0,159
85	1,137	1,57	0,165
136	1,161	2,79	0,168
77	1,173	3,30	0,170
154	1,175	2,12	—
110	1,176	1,83	0,170
82	1,266	1,49	0,183
151	1,272	1,47	0,184
118	1,383	1,30	0,20
134	1,473	1,33	0,214
114	1,495	1,06	0,216
146	1,542	1,60	0,214
153	1,596	1,71	0,231
105	1,646	1,18	0,238
141	1,742	0,74	0,253
137	1,824	0,96	0,263
138	1,920	1,16	0,278
129	2,025	1,10	0,292
187	2,139	0,95	0,309
182	2,139	0,433	0,309
183	2,217	1,129	0,320
128	2,294	0,880	0,333
185	2,374	0,682	0,342

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
174	2,493	1,422	0,361
177	2,582	1,084	0,374
171	2,663	0,898	0,385
180	2,995	0,786	0,433
191	3,135	0,659	0,452
170	3,623	1,547	0,524
196	3,992	0,841	0,576
189	4,409	0,637	0,638
195	4,826	3,01	0,698
194	5,567	0,465	0,806

### **Расчет концентрации индивидуальных ПХБ в образцах**

Количественное определение ПХБ проводят по отношению площадей пиков ПХБ и внутреннего стандарта с использованием калибровочных коэффициентов, определенных при ГЖХ стандартных смесей ПХБ известного количественного состава (табл. 2).

Расчет при использовании метода добавленного внутреннего стандарта проводят по формуле:

$$C_{pcb} = \frac{S_{pcb} \cdot K_s \cdot m_{st}}{S_{st} \cdot M} \text{ мг/кг, где}$$

$C_{pcb}$  — концентрация конгенера ПХБ в образце, мг/кг (ppm);  
 $m_{st}$  — масса внутреннего стандарта, внесенного в очищенный экстракт образца, мкг;

$S_{pcb}$  — площадь пика ПХБ на хроматограмме;

$S_{st}$  — площадь пика внутреннего стандарта на хроматограмме;

$K_s$  — калибровочный коэффициент ПХБ по внутреннему стандарту (по данным табл. 2);

$M$  — навеска образца, г.

За содержание ПХБ в образце принимается суммарное содержание основных 10—15 конгенов ПХБ.



### 11. Расчет погрешности измерений

Расчет погрешности измерений проводят в соответствии с требованиями ГОСТа 8.563—96 и ГОСТа 8.207—76. Вычисляют неисключенную систематическую и случайную погрешности по всем этапам измерений и далее в соответствии с ГОСТом 8.207—76 определяют суммарную погрешность измерений. Статистика оценивалась по смеси индивидуальных ПХБ 48, 155 и 128.

Статистические параметры определения суммы полихлорированных бифенилов в рыбе и рыбопродуктах:

Статистический параметр	Внесено суммы ПХБ, мг/кг				
	0,2	1,0	2,0	10,0	20,0
Среднее обозначение определения $m$ , мг/кг	0,171	0,859	1,73	8,74	17,6
Среднее значение открываемости, % от внесенного	85,3	85,9	86,5	87,4	88,0
Стандартное отклонение сходимости $S_r$ , мг/кг	0,012	0,051	0,097	0,235	0,349
Относительное стандартное отклонение сходимости, % от $m$	2,37	2,26	2,12	2,35	2,34
Показатель сходимости $g$ , мг/кг ( $g = 2,77 S_r$ )	0,033	0,125	0,265	0,651	0,967
Стандартное отклонение воспроизводимости, % от $m$	0,019	0,094	0,119	0,475	0,654
Относительное стандартное отклонение воспроизводимости, % от $m$	3,84	4,37	4,22	4,51	4,39
Показатель воспроизводимости $R$ , мг/кг ( $R = 2,77 S_r$ )	0,053	0,26	0,33	1,31	1,81

### 12. Требования к квалификации исполнителей и техники безопасности

Работу по указанной методике может выполнять группа аналитиков, включающая квалифицированных специалистов в области газожидкостной хроматографии и санитарной химии. Исполнители должны быть проинструктированы об основных мерах техники безопасности при работе с веществами 1—2 класса опасности, органическими растворителями (ацетонитрил, гексан и т. д.), а также с основными правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории.

Для оценки пригодности системы ГЖХ и калибровки колонки предварительно проводят 2 тестовых ГЖХ-анализа стандартных смесей ПХБ:

1. Смесь 1 индивидуальных ПХБ 48, 155, 128 с концентрацией каждого от 50 до 125 нг/мл и внутреннего стандарта 119 с концентрацией 50 нг/мл.\*

2. Смесь 2, содержащая арохлор 1254 с общей концентрацией около 500 нг/мл и внутреннего стандарта 119 с концентрацией 50 нг/мл.\*


\* При недостаточной чувствительности ГЖХ системы можно применять растворы смесей 1 и 2, а также раствор стандарта 119 с десятикратно более высокими концентрациями: смесь 1 – от 500 до 1250 нг/мл, ПХБ-119 – 500 нг/мл и смесь 2 – 5000 нг/мл по арохлору 1254 и 500 нг/мл по ПХБ-119.

**Тест 1.** Вносят в газовый хроматограф 1—2 мкл смеси 1. При этом получают хроматограмму, аналогичную приведенной на рис. 1. Рассчитанные относительные приведенные времена удерживания ПХБ 48, 155, 128 по внутреннему стандарту 119 должны соответствовать данным табл. 2.

**Тест 2.** Вносят в газовый хроматограф 1—2 мкл смеси 2. При этом получают хроматограмму, аналогичную приведенной на рис. 2. Сравнивают рассчитанные по хроматограмме относительные приведенные времена удерживания ПХБ основных компонентов с данными табл. 3.

Относительные приведенные времена удерживания (RRT) основных конгенов арохлора 1254 по ПХБ 119 при ГЖХ на жидкой фазе SE-54 , температура 220 °С

№ инд. ПХБ	RRT по ПХБ 119	RRT по октахлорнафталину
52	0,532	0,077
44	0,611	0,088
41, 64	0,665	0,097
70	0,781	0,114
66	0,802	0,117
95	0,809	0,117
91	0,837	0,122
84	0,891	0,13
101	0,928	0,135
99	0,959	0,14
<b>119</b>	<b>1,000</b>	<b>0,146</b>
97	1,069	0,155
87	1,102	0,160
85	1,136	0,165
110	1,176	0,170
82, 151	1,268	0,185
123, 118	1,388	0,202
146	1,542	0,214
153, 132	1,602	0,233
105	1,646	0,238
141	1,742	0,253
138	1,922	0,279
128	2,298	0,334
171	2,663	0,385

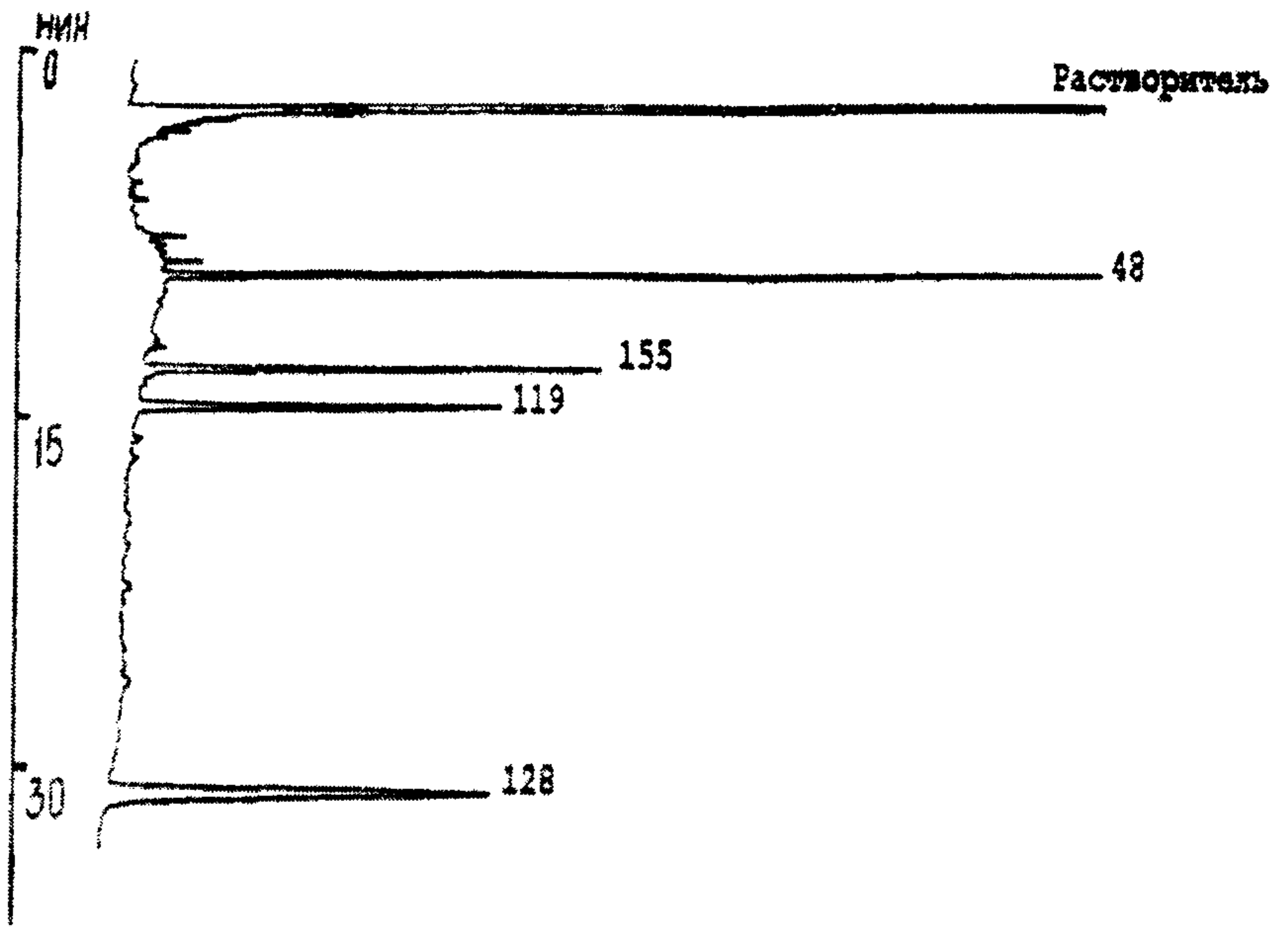

**Рис. 1.** Смесь 1 индивидуальных ПХБ 48, 155, 119, 128.

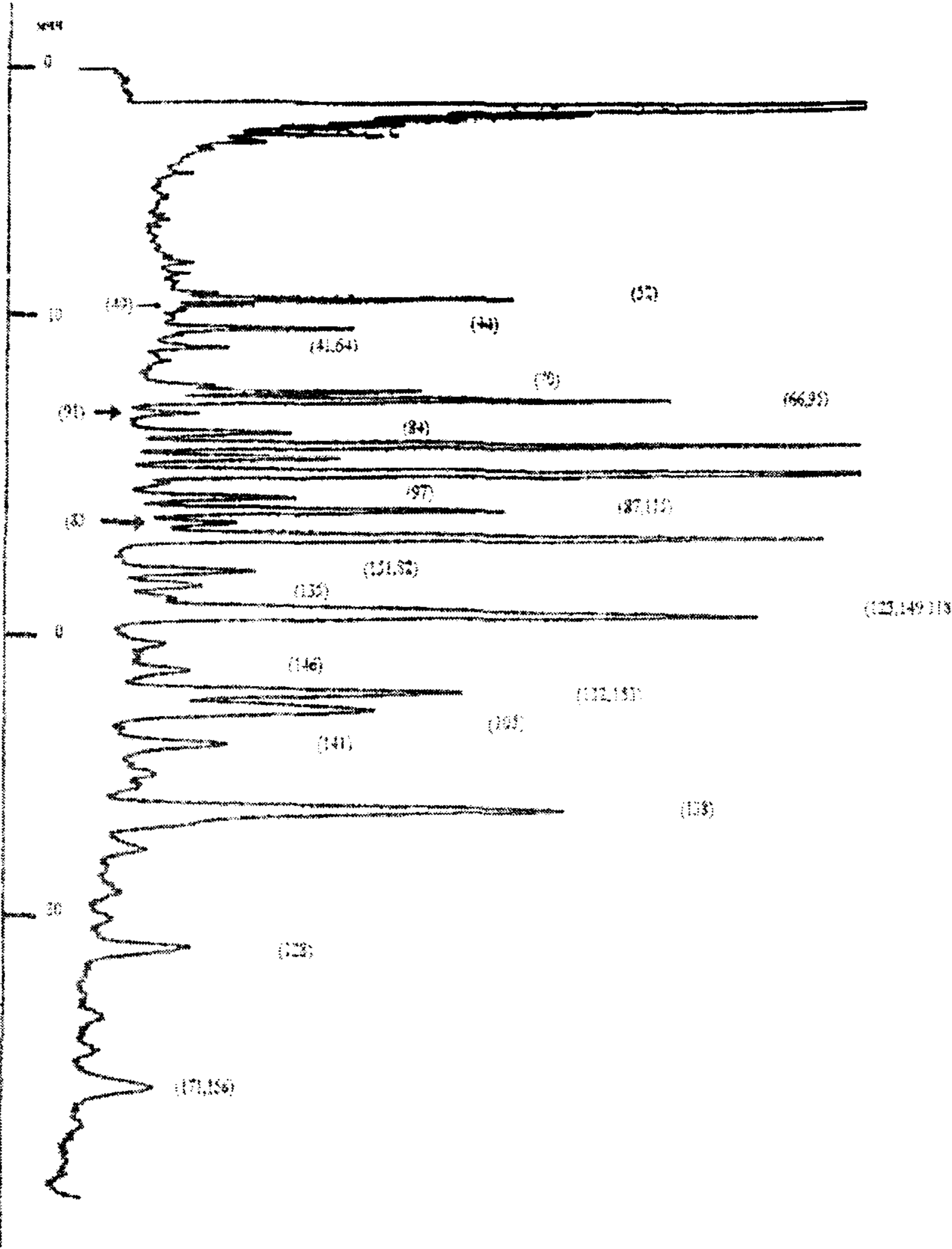


Рис. 2. Смесь 2 арохлор 1254 и ПХБ 119.